




14. As needed, use the handles located along the patient and top of the sheet to position the patient.

APPLYING THE WEDGES

1. Take the two long handles and drape them over the patient towards the opposite side of the bed.
2. Hold onto both handles and pull to turn the patient on their side. If needed, utilize the short handles to hold this position.
3. Ensure the patient is completely side-lying and locate the sacrum.
4. Fully insert the first wedge above the sacrum to support the upper torso. Wedge handles may be used to aid in proper wedge positioning.
5. Fully insert the second wedge below the sacrum to support the hips, buttocks, and thighs.
6. Gently turn the patient onto their back (with wedges underneath). Readjust wedges per facility protocol and/or as needed.
7. Smooth out the sheet and pad, and drape handles over the edge of the bed. Ensure handles are draped away from the patient to prevent entanglement with patient and/or tubing. **NOTE:** Follow facility protocol for number of side rails to remain in the upright position while patient is unattended.
8. Return bed to the lowest height, or appropriate height as determined by care team and/or facility protocol.

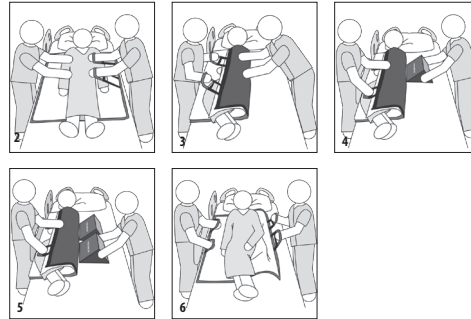

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for ninety (90) days from the date of shipment from deroyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

CLEANING INSTRUCTIONS

Absorbent PAD - If the pad is soiled, dispose and replace promptly in accordance with facility protocols and guidelines.

Sheet - If the sheet is soiled, dispose and replace promptly in accordance with hospital protocols and guidelines. Do not launder.

Wedges - If the wipe able top and bottom surface (black surface) of the wedge is soiled, wipe down with a damp cloth or hospital-approved disinfectant. Dry completely prior to use. If the product is damaged or cleaning is insufficient, replace with a new one.

Replacement sheets, wedges, and pads are available.

SIZING

Universal Sheet (35" x 55")
X-Large Sheet (45" x 55")

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

PRUVENTOR TURNPRO® SYSTEM TURNING AND POSITIONING KIT

	SINGLE PATIENT USE
	NON-STERILE
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings, and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product. Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

INTENDED USE

The DeRoyal® PRUventor TurnPRO® System is intended to assist and maintain proper positioning of the patient while helping prevent sacral pressure injuries.

The sheet is intended to provide assistance to the caregiver when repositioning the patient.

The wedges are intended to off-load the sacrum.

The absorbent pad is intended to help optimize the body's microclimate through breathable material and moisture-wicking technology.

CONTRAINDICATION

Patients who have an unstable spinal injury should not use this system, unless a decision to use has been made by the healthcare professional.

WARNING

- Prior to use, inspect the kit components for damaged, missing, or contaminated product.
- Consult physician or properly licensed practitioner immediately if the patient experiences sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this device.
- **DO NOT** attempt to transfer, carry, or mechanically lift the patient while using this device.
- **DO NOT** hold onto the absorbent pad as a method to position the patient.
- Prior to positioning a patient, ensure movement will not disrupt treatment.
- Make sure patient's head does not drag during positioning.

CAUTIONS

- The components within this system have only been tested in conjunction with each other. Use of outside components could alter proper performance.
- Ensure the pad and sheet lay flat and smooth beneath the



patient.

- To prevent entanglement with patient and/or other medical devices, ensure handles are always draped away from the patient.
- Follow your facility's policies and procedures for frequency of patient repositioning and monitoring.

INSTRUCTIONS FOR USE

Follow your facility's policies and procedures for safe patient handling.

PREPARE THE BED

1. Ensure bed brakes are in the locked position.
2. Ensure the bed is as flat as possible, provided it does not interfere with the patient's condition.
3. Lower or raise the bed to ensure the top layer of the support surface (e.g. mattress) is at the clinician's waist level or elbows.

APPLYING THE SHEET W/ ABSORBENT PAD

1. Ensure side rail(s) are in the upright position.
2. Lower the side rail(s) on the side the clinician is standing to apply the sheet and pad.
3. Unfold the sheet and pad.
4. Keeping the pad directly on top of the sheet, tightly roll approximately half of the pad and sheet length wise, to ensure excess material can be tucked underneath the patient in Step 8.
5. Position the top of the rolled sheet and pad directly above the patient's shoulders.
6. Gently turn the patient away from the clinician on to their side and keep them side-lying. Follow facility's safe patient handling recommendations and/or protocol for number of individuals required to safely turn a patient.
7. Bring the rolled sheet and pad to the center of the bed.
8. Push and tuck the rolled portion of the sheet and pad underneath the patient, ensuring the top of the sheet sits directly above the patient's shoulders.
9. Raise the side rail(s), and gently turn the patient onto their back.
10. Lower the side rail(s) on the other side.
11. Gently turn the patient onto the exposed sheet and pad and keep them side-lying.
12. Unroll the rest of the sheet and pad. Drape the handles of the sheet over the edge of the bed.
13. Raise the side rail(s), and gently turn the patient onto their back.







Manufactured by:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or (001) 865.938.7828
www.deroyal.com

PART #0-2010 | REVISED 5/2026

©2026 DEROYAL INDUSTRIES, INC.

All Rights Reserved. DeRoyal, PRUventor TurnPRO, and the DeRoyal logo are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

KIT DE RETOURNEMENT ET DE POSITIONNEMENT PRUVENTOR TURNPRO®

	PRODUIT RESERVE A L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT
	NON STERILE
	NON FABRIQUE EN LATEX NATUREL
	LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.

INFORMATION IMPORTANTE

Avant l'utilisation, lire l'ensemble des instructions, avertissements et précautions. Une application correcte est essentielle pour assurer la parfaite efficacité du produit. Utiliser uniquement sur la personne à laquelle le dispositif a été prescrit par un professionnel de santé et uniquement pour l'usage prévu.

USAGE PRÉVU

Le système DeRoyal® PRUventor TurnPRO® est conçu pour faciliter et maintenir le bon positionnement du patient et aide à prévenir les escarres au niveau du sacrum.

Cette fiche est destinée à aider le soignant lors du repositionnement du patient.

Les cales sont destinées à soulager le sacrum.

Le tapis absorbant est conçu pour optimiser le microclimat du corps grâce à une matière respirante et à une technologie qui absorbe l'humidité.

CONTRE-INDICATIONS

Ce système ne doit pas être utilisé sur les patients présentant une lésion médullaire instable, sauf si le professionnel de santé le décide.

AVERTISSEMENT

- Vérifier que les composants du kit ne sont pas endommagés ou contaminés, ou qu'il ne manque pas des composants avant l'utilisation.
- Consulter immédiatement un médecin ou praticien agréé en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur prolongée chez le patient lors de l'utilisation de ce dispositif.
- **NE PAS** essayer de porter un patient lors de l'utilisation de ce dispositif.
- **NE PAS** utiliser le tapis absorbant pour positionner le patient.
- Avant de positionner le patient, s'assurer que le mouvement ne perturbe pas le traitement.
- S'assurer que la tête du patient ne bascule pas pendant le positionnement.

MISES EN GARDE

- Les composants dans ce système n'ont été testés qu'en association les uns avec les autres. L'emploi d'éléments

- extérieurs risque de nuire à son bon fonctionnement.
- Veiller à ce que le tapis et le drap soient bien à plat et tendus sous le patient.
- Veiller à ce que les poignées soient écartées du patient pour éviter tout enchevêtrement avec lui et/ou tout autre dispositif médical.
- Respecter les politiques et les procédures de l'établissement relatives à la surveillance périodique du patient.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Respecter les politiques et les procédures de l'établissement pour manipuler le patient en sécurité.

PRÉPARATION DU LIT

1. S'assurer que les freins du lit sont en position verrouillée.
2. Veiller à ce que le lit soit aussi plat que possible, à condition que cela ne nuise pas à l'état du patient.
3. Abaisser ou relever le lit pour s'assurer que la couche supérieure de la surface d'appui (p. ex., le matelas) se trouve à hauteur de la taille ou des coudes du soignant.


POSITIONNEMENT DU DRAP AVEC LE TAPIS ABSORBANT

1. S'assurer que la ou les barrières latérales sont en position relevée.
2. Abaisser la ou les barrières latérales du côté où se trouve le soignant pour mettre en place le drap et le tapis.
3. Déplier le drap et le tapis.
4. Maintenir le tapis sur le drap et enrouler fermement environ la moitié du tapis et du drap dans le sens de la longueur, afin de pouvoir glisser l'excédent de matière sous le patient à l'étape 8.
5. Positionner le haut du drap et du tapis enroulés directement au-dessus des épaules du patient.
6. Tourner délicatement le patient dans le sens opposé au soignant et le mettre en décubitus latéral, puis le maintenir dans cette position. Suivre les recommandations et/ou le protocole de l'établissement concernant le nombre de personnes nécessaires pour tourner un patient en toute sécurité.
7. Placer le drap et le tapis enroulés au centre du lit.
8. Pousser et glisser la partie enroulée du drap et du tapis sous le patient, tout en veillant à ce que le haut du drap se trouve juste au-dessus des épaules du patient.
9. Relever la ou les barrières latérales, puis retourner délicatement le patient sur le dos.
10. Abaisser la ou les barrières latérales de l'autre côté.
11. Tourner délicatement le patient sur la partie exposée du drap et du tapis, mettre le patient en décubitus latéral, puis le maintenir dans cette position.
12. Dérouler le reste du drap et du tapis. Faire passer les poignées par-dessus le bord du lit.
13. Relever la ou les barrières latérales, puis retourner délicatement le patient sur le dos.
14. Si nécessaire, utiliser les poignées situées le long du patient et en haut du drap pour positionner le patient.

POSITIONNEMENT DES CALES

1. Saisir les deux longues poignées et les faire passer par-dessus le patient vers le côté opposé du lit.
2. Tenir les deux poignées, puis tirer pour tourner le patient sur le côté. Si nécessaire, utiliser les poignées courtes pour

- maintenir cette position.
3. Vérifier que le patient est complètement couché sur le côté, en décubitus latéral, puis localiser le sacrum.
4. Placer entièrement la première cale au-dessus du sacrum pour soutenir le haut du torse. Les poignées peuvent aider à bien positionner la cale.
5. Placer entièrement la deuxième cale sous le sacrum pour soutenir les hanches, les fesses et les cuisses.
6. Tourner délicatement le patient sur le dos (en plaçant des cales en dessous). Réajuster les cales conformément au protocole de l'établissement et/ou selon les besoins.
7. Lisser le drap et le tapis, puis faire passer les poignées par-dessus le bord du lit. Veiller à ce que les poignées soient écartées du patient pour éviter tout enchevêtrement avec lui et/ou les tubulures. **REMARQUE** : Suivre les consignes de l'établissement quant au nombre de barrières latérales à maintenir en position relevée lorsque le patient est laissé sans surveillance.
8. Régler le lit à la hauteur la plus basse, ou à la hauteur la plus appropriée, telle que déterminée par l'équipe soignante et/ou le protocole de l'établissement.

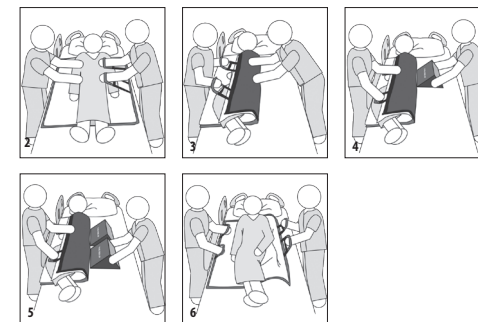

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Tapis absorbant : si le tapis est sale, le jeter et le remplacer rapidement, conformément aux protocoles et aux consignes de l'établissement.

Drap : si le drap est sale, le jeter et le remplacer rapidement, conformément aux protocoles et aux consignes de l'établissement. Ne pas laver en machine.

Cales : lorsque les surfaces supérieure et inférieure (surface noire) de la cale sont sales, celles-ci peuvent être nettoyées. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou un désinfectant homologué pour un usage en milieu hospitalier. Laisser sécher complètement avant utilisation. Si le produit est abîmé ou que le nettoyage ne suffit pas, le remplacer par un produit neuf.

Des draps, des cales et des tapis de rechange sont disponibles.

TAILLES

Drap universel (35" x 55")
Drap XL (45" x 55")

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULIER.**