



Almindeligt anvendte symboler

Glossar over almindeligt anvendte symboler på DeRoyal medicinsk udstyrs emballage og mærkater

symbol	forklarende tekst	standardreference	standardtitel
	Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.6	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Katalog- eller modelnummer		ISO 7000- 2493	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver producentens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.5	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Batchkode		ISO 7000-2492	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver producentens serienummer, så det specifikke medicinske udstyr kan identificeres.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.7	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Serienummer		ISO 7000-2498	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.	ISO 15223-1, afsnit 5.3.4	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Opbevares tørt		ISO 7000-0626	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod sollys.	ISO 15223-1, afsnit 53.2	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Må ikke udsættes for sollys		ISO 7000-0624	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver producenten af det medicinske udstyr.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.1	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Producent		ISO 7000-3082	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev produceret.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.3	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Produktionsdato		ISO 7000-2497	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
R_x Only	Kræver recept i USA.	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Mærkning-Medicinsk udstyr. Tilstedeværelse af påkrævede mærkeerklæringer.
Receptpligtig		21 CFR 801.109	Mærkning-Receptpligtigt udstyr.
	Angiver medicinske udstyr, der ikke må anvendes, hvis pakken er blevet beskadiget eller åbnet.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.8	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget		ISO 7000-2606	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.



Almindeligt anvendte symboler









Glossar over almindeligt anvendte symboler på DeRoyal medicinsk udstyrs emballage og mærkater

symbol	forklarende tekst	standardreference	standardtitel
	Angiver tilstedeværelse af naturligt gummi eller tørt naturligt gummilatex som komponentmateriale i det medicinske udstyr eller i emballagen til medicinsk udstyr.	ISO 15223-1, afsnit 5.4.5	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Indeholder naturligt gummilatex			Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver, at enhedens konstruktionsmaterialer eller dens emballage ikke er fremstillet af naturgummi eller tørt naturgummilatex.	ISO 15223-1, afsnit 5.4.5, Der henvises til Tillæg B for negationssymbol	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Ikke fremstillet med naturgummilatex			Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver datoen, hvor efter det medicinske udstyr ikke må anvendes.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.4	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Anvendes inden		ISO 7000-2607	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
	Angiver behov for, at brugeren rådfører sig med brugsanvisningen.	ISO 15223-1, afsnit 5.4.3	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Læs brugsanvisningen		IEC 60601-1, tabel D.1, symbol 11	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
		ISO 7000-1641	Elektromedicinsk udstyr — Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel ydeevne.
			Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver behov for, at brugeren rådfører sig med brugsanvisningen for at læse om forsigtighedsforanstaltninger som advarsler og forholdsregler, der af forskellige årsager ikke kan præsenteres på selve det medicinske udstyr.	ISO 15223-1, afsnit 5.4.4	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Forbehold		IEC 60601-1, tabel D.1, symbol 10	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
			Elektromedicinsk udstyr — Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel ydeevne.
	Angiver medicinsk udstyr, der er beregnet til engangsbrug eller til brug på én patient under en enkelt procedure.	ISO 15223-1, afsnit 5.4.2	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Må ikke genbruges		ISO 7000-1051	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
			Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Der henvises til betjeningsvejledningen/håndbogen.	IEC 60601-1, tabel D.2, symbol 10	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Følg brugsanvisningen			Elektromedicinsk udstyr — Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel ydeevne.
	Angiver overensstemmelse med EU-tekniske dokumenter.	765/2008/EF 768/2008/EF MDD 93/42/EØF artikel 4,11,12,17, bilag II)	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
CE-mærke			Krav om akkreditering og markedsovervågning i relation til markedsføring af produkterne. Direktiv om medicinsk udstyr.
	Angiver den autoriserede repræsentant indenfor EU.	ISO 15223-1, afsnit 5.1.2	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Autoriseret repræsentant i EU			Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.



Almindeligt anvendte symboler






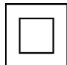

Glossar over almindeligt anvendte symboler på DeRoyal medicinsk udstyrs emballage og mærkater

symbol	forklarende tekst	standardreference	standardtitel
	Angiver temperaturgrænser, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.	ISO 15223-1, afsnit 5.3.7	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Temperaturområde for opbevaring		ISO 7000-0632	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver den laveste temperaturgrænse, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.	ISO 15223-1, afsnit 5.3.5	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav. Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Laveste temperaturgrænse for opbevaring		ISO 7000-0534	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver den højeste temperaturgrænse, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.	ISO 15223-1, afsnit 5.3.6	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav. Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Højeste temperaturgrænse for opbevaring		ISO 7000-0533	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver det luftfugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.	ISO 15223-1, afsnit 5.3.8	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Luftfugtighedsbegrænsning		ISO 7000-2620	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver medicinsk udstyr, der ikke må gensteriliseres.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.6	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav. Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Må ikke gensteriliseres		ISO 7000-2608	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver medicinske udstyr, der ikke har været udsat for en sterilisationsproces.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.7	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav. Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Ikke-steril		ISO 7000-2609	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver medicinske udstyr, der har været udsat for en sterilisationsproces.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.1	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav. Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Produktet har været udsat for en sterilisationsproces		ISO 7000-2499	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver medicinske udstyr, der er blevet steriliseret vha. stråling.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.4	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav. Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr.
Steriliseret vha stråling		ISO 7000-2502	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.



Almindeligt anvendte symboler









Glossar over almindeligt anvendte symboler på DeRoyal medicinsk udstyrs emballage og mærkater

symbol	forklarende tekst	standardreference	standardtitel
	Angiver medicinske udstyr, der er blevet steriliseret vha. aseptisk teknik.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.2	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Steriliseret vha. aseptisk teknik		ISO 7000-2500	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr. Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver medicinske udstyr, der er blevet steriliseret vha. ethylenoxid.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.3	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Steriliseret vha. ethylenoxidbehandling		ISO 7000-2501	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr. Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver medicinske udstyr, der er blevet steriliseret vha. damp eller tør varme.	ISO 15223-1, afsnit 5.2.5	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Steriliseret vha. damp eller tør varme		ISO 7000-2503	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr. Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Angiver, at der er mulige biologiske risici knyttet til det medicinske udstyr.	ISO 15223 5.4.1	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Biologiske risici		ISO 7000-0659	Medicinsk udstyr — Symboler, der anvendes med mærkater, mærkning og information til medfølgende medicinsk udstyr. Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
	Apparat med dobbelt isolering	IEC 60417-5172	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
Apparat med dobbelt isolering			
	Type BF anvendt del	IEC 60417-5333	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
Type BF anvendt del			
	Klassificerer og bestemmer beskyttelsesgraden, der leveres af det elektriske udstyrs kabinet/hylster. • Beskyttelse mod faste objekter > 12,5 mm. • Beskyttelse mod vand, der sprøjtes op til 15 mm fra lodret	IEC 60529* *(har intet referencenummer i henhold til 60601-1 [2005] s. 645)	Grafiske symboler, der anvendes på udstyret.
IP-kode, international beskyttelsesmærkning			



Almindeligt anvendte symboler

Glossar over almindeligt anvendte symboler på DeRoyal medicinsk udstyrs emballage og mærkater

symbol	forklarende tekst	standardreference	standardtitel
	Sikkerhed for magnetisk resonans	ASTM F2503	Standard praksis til mærkning af medicinsk udstyr og andre anordninger i forbindelse med sikkerhed i omgivelser med magnetisk resonans.
MR-sikkerhed			
	Betingelser for magnetisk resonans	ASTM F2503	Standard praksis til mærkning af medicinsk udstyr og andre anordninger i forbindelse med sikkerhed i omgivelser med magnetisk resonans.
MR-betingelse			
	Usikkerhed for magnetisk resonans	ASTM F2503	Standard praksis til mærkning af medicinsk udstyr og andre anordninger i forbindelse med sikkerhed i omgivelser med magnetisk resonans.
MR-usikkerhed			
	Affald fra elektriske og elektroniske produkter	EN 50419	Standard praksis til mærkning af medicinsk udstyr og andre anordninger i forbindelse med sikkerhed i omgivelser med magnetisk resonans.
WEEE			
	Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling	IEC 60417 REF 5140	Standard praksis til mærkning af medicinsk udstyr og andre anordninger i forbindelse med sikkerhed i omgivelser med magnetisk resonans.
Ikke-ioniserende stråling			
	Angiver, at fremstillingsmaterialerne ikke indeholder ftalatblødgøringsmidlet DEHP.	BS EN 15986 Tillæg B	Symbol til brug ved mærkning af medicinsk udstyr – Krav til mærkning af medicinsk udstyr, der indeholder ftalater.
Indeholder ikke DEHP			
	Angiver, at emnet er et medicinsk udstyr.	ISO 15223 – 1, afsnit 5.7.7	Medicinsk udstyr – Symboler, der anvendes med information, der skal tilvejebringes af producenten - del 1: Generelle krav.
Medicinsk Udstyr			
	Signifies UK (United Kingdom) technical conformity	Regulation 765/2008	The requirements for accreditation and market surveillance relating to marketing of products.
UKCA Mærkning			