



Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 1

simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
	Indica il numero di catalogo del produttore per consentire l'identificazione del dispositivo medico.	ISO 15223-1, punto 5.1.6	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Numero di catalogo o modello		ISO 7000-2493	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica il codice del lotto del produttore per consentire l'identificazione del lotto o della partita.	ISO 15223-1, punto 5.1.5	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Codice lotto		ISO 7000-2492	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica il numero di serie del produttore per consentire l'identificazione del dispositivo medico in questione.	ISO 15223-1, punto 5.1.7	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Numero di serie		ISO 7000-2498	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.	ISO 15223-1, punto 5.3.4	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Teme l'umidità		ISO 7000-0626	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dalle sorgenti di luce.	ISO 15223-1, punto 53.2	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Tenere al riparo dalla luce del sole		ISO 7000-0624	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica il produttore del dispositivo medico.	ISO 15223-1, punto 5.1.1	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Produttore		ISO 7000-3082	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica la data in cui è stato fabbricato il dispositivo medico.	ISO 15223-1, punto 5.1.3	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Data di fabbricazione		ISO 7000-2497	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica l'entità che distribuisce il dispositivo medico sul mercato locale.	ISO 15223-1, punto 5.1.9	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Distributore		ISO 7000-3724	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica l'entità che importa il dispositivo nel mercato locale.	ISO 15223-1, punto 5.1.8	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
UE Importatore		ISO 7000-3725	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Richiede una prescrizione medica negli Stati Uniti.	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Etichettatura per dispositivi medici; importanza delle indicazioni richieste sull'etichetta.
Solo su prescrizione medica		21 CFR 801.109	Etichettatura per dispositivi soggetti a prescrizione medica.










Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 2

simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
	Indica che un dispositivo medico non deve essere utilizzato se la confezione è danneggiata o aperta.	ISO 15223-1, punto 5.2.8	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata		ISO 7000-2606	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica un dispositivo medico che si può rompere o danneggiare se non maneggiato con attenzione.	ISO 7000-0621, 2014-06-04	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Fragile, maneggiare con cura			Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica un dispositivo medico contenente una batteria.	IEC 60417-5001B	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi.
Batteria			
	Indica la presenza di gomma naturale o di lattice di gomma naturale secca come materiale di costruzione all'interno del dispositivo medico o della confezione di un dispositivo medico.	ISO 15223-1, punto 5.4.5	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Contiene gomma naturale lattice			Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica che i materiali con cui è realizzato il dispositivo o la sua confezione non sono stati prodotti con lattice di gomma naturale o di gomma naturale essiccata.	ISO 15223-1, punto 5.4.5, Consultare l'Allegato B per il simbolo di negazione	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Non in lattice di gomma naturale			Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica la data oltre la quale il dispositivo medico non deve essere utilizzato.	ISO 15223-1, punto 5.1.4	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Data di scadenza		ISO 7000-2607	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite. Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.	ISO 15223-1, punto 5.4.3	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Consultare le istruzioni per l'uso		IEC 60601-1, Tabella D.1, Simbolo 11	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
		ISO 7000-1641	Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali. Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso per acquisire informazioni importanti, quali avvertenze e precauzioni che non possono, per vari motivi, essere presentate sul dispositivo medico stesso.	ISO 15223-1, punto 5.4.4	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Attenzione		IEC 60601-1, Tabella D.1, Simbolo 10	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite. Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.
	Indica un dispositivo medico concepito per un solo uso o per l'uso su un singolo paziente durante una singola procedura.	ISO 15223-1, punto 5.4.2	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Non riutilizzare			ISO 7000-1051













Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 3

simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
	Fare riferimento al manuale/ libretto d'istruzioni.	IEC 60601-1, Tabella D.2, Simbolo 10	Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.
Seguire le istruzioni per l'uso			
	Indica la conformità tecnica europea.	765/2008/CE 768/2008/ CE MDD 93/42/CEE Articoli 4,11,12,17, Allegato II)	Le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; Direttiva sui Dispositivi Medici.
Marcatura CE			
	Indica la conformità tecnica per il Regno Unito.	Normativa 765/2008	Le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
Marcatura UKCA			
	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.	ISO 15223-1, punto 5.1.2	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Rappresentante europeo autorizzato			
	Indica i limiti di temperatura ai quali il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.	ISO 15223-1, punto 5.3.7	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Intervallo di temperature di magazzinaggio		ISO 7000-0632	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica il limite inferiore di temperatura al quale il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.	ISO 15223-1, punto 5.3.5	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Limite inferiore di temperatura di magazzinaggio		ISO 7000-0534	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica il limite superiore di temperatura al quale il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.	ISO 15223-1, punto 5.3.6	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Limite superiore di temperatura di magazzinaggio		ISO 7000-0533	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	Indica l'intervallo di umidità cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.	ISO 15223-1, punto 5.3.8	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Limite di umidità		ISO 7000-2620	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
	To indicate the acceptable upper and lower limits of atmospheric pressure for transport and storage.	ISO 15223-1, Clause 5.3.9	Medical Devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General Requirements.
Atmospheric Pressure		ISO 7000-2621	Graphical symbols for use on equipment.
	Indica un dispositivo medico che non deve essere risterilizzato. NOTA: i sinonimi di "Non riutilizzare" sono "monouso" e "utilizzare solo una volta".	ISO 15223-1, punto 5.2.6	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali. Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
Non risterilizzare		ISO 7000-2608	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.










Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 4


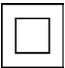







simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
	Indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto ad un processo di sterilizzazione.	ISO 15223-1, punto 5.2.7	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Non sterile		ISO 7000-2609	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica un dispositivo medico che è stato sottoposto ad un processo di sterilizzazione.	ISO 15223-1, punto 5.2.1	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Prodotto sottoposto ad un processo di sterilizzazione		ISO 7000-2499	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica un dispositivo medico che è stato sterilizzato con irradiazione.	ISO 15223-1, punto 5.2.4	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Sterilizzato con irradiazione		ISO 7000-2502	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica un dispositivo medico che è stato sterilizzato con tecniche asettiche.	ISO 15223-1, punto 5.2.2	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Sterilizzato con tecniche asettiche		ISO 7000-2500	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica un dispositivo medico che è stato sterilizzato con ossido di etilene.	ISO 15223-1, punto 5.2.3	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Sterilizzato mediante trattamento con ossido di etilene		ISO 7000-2501	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica un dispositivo medico che è stato sterilizzato con vapore o calore secco.	ISO 15223-1, punto 5.2.5	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Sterilizzato con vapore o calore secco		ISO 7000-2503	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.
	Indica la presenza di potenziali rischi biologici associati al dispositivo medico.	ISO 15223 5.4.1	Dispositivi medici — Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici — Parte 1: Prescrizioni generali.
Rischi biologici		ISO 7000-0659	Dispositivi medici — Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.



Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
	Qualsiasi terminale previsto per il collegamento a un conduttore esterno per la protezione da folgorazione in caso di anomalie, oppure il terminale di un elettrodo di messa a terra di protezione.	IEC 60417-5019	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Utilizzato per contrassegnare il terminale del conduttore di messa a terra di protezione delle apparecchiature di classe I.
Messa a terra di protezione; Messa a terra di protezione			
	Apparecchio a doppio isolamento	IEC 60417-5172	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Apparecchio a doppio isolamento			
	Gli apparecchi di classe III sono progettati per essere alimentati da una fonte di alimentazione separata a bassissima tensione di sicurezza (SELV). La tensione fornita da un alimentatore SELV è sufficientemente bassa da consentire a una persona, in condizioni normali, di entrare in contatto con la tensione senza il rischio di scosse elettriche.	IEC 60417-5180	Simboli grafici da utilizzare sulle apparecchiature conformi ai requisiti di sicurezza specificati per gli apparecchi di classe III ai sensi della norma IEC 61140: Protezione contro le scosse elettriche — Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature.
Apparecchio elettrico di classe III			
	Parte applicata di tipo B conforme alla norma IEC 60601-1.	IEC 60417-5840 IEC 60878 IEC 60601-1	Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.
Parte applicata tipo B			
	Parte applicata tipo BF	IEC 60417-5333	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Parte applicata tipo BF			
	Classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri/quadri di dispositivi elettrici. • PROTEZIONE contro l'ingresso di corpi solidi > 12,5 mm; • PROTEZIONE contro gli spruzzi d'acqua fino a 15° rispetto alla verticale	IEC 60529* *(non dispone di un numero di riferimento secondo 60601-1 [2005] p.645)	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Codice IP, Marcatura Internazionale di Protezione			
	Compatibile con la risonanza magnetica.	ASTM F2503	Prassi standard per contrassegnare dispositivi medici e altri strumenti in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica.
Compatibile con la RM			
	A compatibilità condizionata con la risonanza magnetica.	ASTM F2503	SPrassi standard per contrassegnare dispositivi medici e altri strumenti in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica.
A compatibilità RM condizionata			
	Non compatibile con la risonanza magnetica.	ASTM F2503	Prassi standard per contrassegnare dispositivi medici e altri strumenti in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica.
Non compatibile con la RM			














Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 6

simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
	A prova di scarica del defibrillatore.	IEC 60417-5336	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici. Parte applicata di tipo CF.
A prova di scarica del defibrillatore			
	Indica che la parte è conforme a un grado superiore di protezione contro le scosse elettriche secondo la definizione della norma IEC 60601-1.	IEC 60601-1 IEC 60878	Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.
Apparecchio elettrico di tipo CF			
	Per indicare l'obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).	EN 50419	Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic. Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
RAEE (WEEE)			
	Radiazione elettromagnetica non ionizzante.	IEC 60417 REF 5140	Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic.
Radiazione non ionizzante			
	Indica che i materiali con cui è realizzato il dispositivo non comprendono il plastificante ftalato DEHP.	BS EN 15986 Allegato B	Simbolo da utilizzare nell'etichettatura dei dispositivi medici — Requisiti per l'etichettatura dei dispositivi medici contenenti ftalati.
Non contiene DEHP			
	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.	ISO 15223 - 1, Clause 5.7.7	Dispositivi Medici — Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite dal produttore — Parte 1: Requisiti generali.
Dispositivi Medici			
	Indica un sistema di barriera sterile singola.	ISO 7000-3707	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Sistema di barriera sterile singola			
	Indica due sistemi di barriera sterile.	ISO 7000-3704	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Sistema di barriera sterile doppia			
	Indica un sistema di barriera sterile singola con imballaggio protettivo all'interno.	ISO 7000-3708	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Sistema di barriera sterile singola con imballaggio protettivo all'interno			
	Indica un sistema di barriera sterile singola con imballaggio protettivo all'esterno.	ISO 7000-3709	Simboli utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici.
Sistema di barriera sterile singola			
	Il marchio Benchmark è un marchio di certificazione registrato e gestito da BSI.	Non applicabile	Non applicabile
Certificazione di prodotto Benchmark			











Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 7

simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
 JAS-ANZ Marchio di riconoscimento di accreditamento	Conformità ai requisiti AS/NZS (Australia/Nuova Zelanda)	Non applicabile	Non applicabile
 NFPA 704 Rombo dei pericoli	Fornisce un'idea generale dei pericoli associati a un materiale e della gravità di tali pericoli in termini di risposta in caso di emergenza. <ul style="list-style-type: none"> • ROSSO: Pericolo di incendio 0 - Non brucia • BLU: Pericolo per la salute 0 - Pericolosità non superiore a quella di materiali ordinari • GIALLO: Pericolo di reattività 0 - Stabile • BIANCO: Pericolo speciale - Sicurezza degli occhi 	NFPA 704: 2022	Associazione nazionale per la protezione antincendio (NFPA): sistema standard per l'identificazione dei pericoli dei materiali per la reazione in caso di emergenza.
 Allarme, generale	Indica la presenza di un allarme su un apparecchio di controllo	IEC 60601-1-8 and IEC 60417	Apparecchi elettromedicali - Parte 1-8: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Requisiti generali, prove e linee guida per i sistemi di allarme negli apparecchi e nei sistemi elettromedicali e simboli grafici da utilizzare sulle apparecchiature
 Inibizione allarme	Identifica la funzione di inibizione dell'allarme sull'apparecchi di controllo.	IEC 60601-1-8 and IEC 60417	Apparecchi elettromedicali - Parte 1-8: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Requisiti generali, prove e linee guida per i sistemi di allarme negli apparecchi e nei sistemi elettromedicali e simboli grafici da utilizzare sulle apparecchiature
 Audio in pausa	Identifica il comando AUDIO IN PAUSA oppure indica che il SISTEMA DI ALLARME si trova nello stato di AUDIO IN PAUSA	IEC 60601-1-8 and IEC 60417	Apparecchi elettromedicali - Parte 1-8: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Requisiti generali, prove e linee guida per i sistemi di allarme negli apparecchi e nei sistemi elettromedicali e simboli grafici da utilizzare sulle apparecchiature
 Sollevamento a due persone	Indica che il sollevamento deve essere effettuato da due persone	ANSI Z535.4 and ISO 3864-2	Norma nazionale americana per segnali ed etichette di sicurezza dei prodotti e simboli grafici - Colori e segnali di sicurezza, Parte 2: Principi di progettazione per le etichette di sicurezza dei prodotti
 Questo lato in alto	Indica la corretta posizione verticale dell'imballaggio di trasporto	ISO 7000	Simboli grafici da utilizzare sulle apparecchiature - Simboli registrati
 Nocivo	Questo pittogramma GHS con punto esclamativo indica una sostanza nociva o irritante.	29 CFR 1910.1200	Norme per la sicurezza e la salute sul lavoro - Comunicazione dei pericoli








Simboli comunemente utilizzati

Glossario dei simboli comunemente utilizzati sulle confezioni e sulle etichette dei dispositivi medici DeRoyal



pagina 8

simbolo	testo esplicativo	norma di riferimento	titolo della norma
 Avvertenza	Segnale di avvertenza generale che richiede un segnale supplementare per fornire ulteriori informazioni sul pericolo. Il rischio è specificato dal segnale supplementare.	ISO 7010	Simboli grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
 Non contiene ftalati	Indica che i materiali con cui è realizzato il dispositivo non comprendono ftalati	BS EN 15986 Ek B	Simbolo da utilizzare nell'etichettatura dei dispositivi medici - Requisiti per l'etichettatura dei dispositivi medici contenenti ftalati
 Marchio UL di classificazione per Canada e Stati Uniti	I marchi UL relativi al servizio di classificazione sono apposti su campioni rappresentativi di prodotti valutati da UL Solutions in relazione a specifiche proprietà, a una gamma limitata di rischi oppure alla loro idoneità all'uso in condizioni limitate o particolari.	Non applicabile	Non applicabile
 Marchio di certificazione ETL Intertek	Il marchio ETL di Intertek attesta la conformità del prodotto agli standard di sicurezza nordamericani.	Non applicabile	Non applicabile
 Conforme FCC	Questo logo, o marchio FCC, indica che il dispositivo è stato sottoposto a prove e risulta conforme alla normativa FCC.	47 CFR Part 18	Telecomunicazioni - Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC) - Apparecchiature industriali, scientifiche e medicali